

OKOIA

Pèse-personne GS6

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

Health by
OKOIA

GS6

ELECTRONIC PERSONAL SCALE

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE

ELEKTRONISCHE WEEGSCHAAL

BÁSCULA DE BAÑO ELECTRÓNICA

BALANÇA PESSOAL ELETRÓNICA



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

■ ATTENTION

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



■ MISES EN GARDE IMPORTANTES


- Ce pèse-personne doit toujours reposer sur une surface dure et parfaitement plane lorsqu'il fonctionne. NE PAS utiliser sur une moquette.
- Ce pèse-personne ne doit pas subir de chocs ou de chutes, ni être secoué.
- Ne montez pas sur le pèse-personne avec les pieds mouillés, vous risqueriez de glisser sur la surface de verre.
- Ce pèse-personne doit être gardé au sec.
- Restez immobile pendant la pesée.
- Évitez de heurter le pèse-personne avec un objet dur ou de tomber dessus, vous risqueriez de briser la surface en verre. Le pèse-personne doit être rangé à l'horizontale, jamais à la verticale. La pile doit impérativement être changée par un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser le pèse-personne si le couvercle du compartiment à pile n'est pas en place.
- Si la pile n'est pas placée dans le bon sens, l'appareil risque d'être endommagé, voire même de prendre feu.

Cet appareil fonctionne avec une pile lithium de 3 V.
 Cette pile est située à l'intérieur et est facilement accessible.
 Pour sortir la pile, ôtez le couvercle du compartiment.
 À la fin de sa durée de vie, la pile doit être apportée au centre de recyclage le plus proche.



Changement de la pile

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile.
2. Sortez la pile à l'aide d'un objet pointu.
3. Mettez la pile neuve sur le porte-pile, le signe + vers le haut.
Si la pile n'est pas placée correctement, l'appareil ne fonctionnera pas.
4. Remettez en place le couvercle des piles.

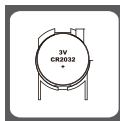

UTILISATION

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et parfaitement plane. Évitez les moquettes et autres surfaces molles.
2. Allumez le pèse-personne en tapant doucement sur la plateforme de pesée.
3. Montez sur le pèse-personne et tenez-vous droit.
 - Les chiffres clignotent à l'écran, indiquant que la mesure est valable.
4. Au bout d'une certaine durée d'inactivité, le pèse-personne s'éteint automatiquement.



Unités de poids

Le pèse-personne peut indiquer le poids en kilogrammes, en livres ou en stones. Choisissez l'unité en appuyant le nombre de fois nécessaire sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil.



Témoins avertisseurs

- Si l'écran affiche "C", descendez du pèse-personne puis remontez à nouveau dessus.
- Lorsque l'écran affiche "Lo", les piles ont besoin d'être changées.
- En cas de surcharge, l'écran du pèse-personne affiche "Err".
Descendez du pèse-personne afin d'éviter de l'abîmer.

SPECIFICATIONS

Poids maximum : 150 KG / 330 LB / 24 STONE
Poids minimum : 2 KG / 4 LB
Graduations : 0,1 KG / 0,2 LB

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.



Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vendan Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

■ **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Ne mettez jamais le pèse-personne dans l'eau.

N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Rangez-le dans un endroit sec et propre.

FNAC DARTY

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY
FRANCE

EU Declaration of Conformity

N°86201308011

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaración UE de conformidad
Declaração de conformidade da UE

Product Description - ELECTRONIC PERSONAL SCALE

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripción del producto :

Descrição do produto:

Brand - Marque /Merk /Marca: Okoia

Model number - Référence commerciale : GS6

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number

Title

<input checked="" type="checkbox"/>	2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
<input type="checkbox"/>	2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
<input type="checkbox"/>	2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
<input checked="" type="checkbox"/>	2011/65/UE	RoHS

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:



Name - Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy, October 15, 2019

